

Quadros de Corte de Zona Gases Medicinais



Seguridad

El Cuadro de Corte de Zona facilita el corte controlado de gases medicinales al área correspondiente mediante las válvulas de corte que lleva incorporadas, así como el suministro individual en caso de emergencia a través de la toma de gas integrada en el equipo.

Esencial para todo ámbito hospitalario, permitiendo el registro y señalización de las válvulas de corte proporcionando al usuario una herramienta de seguridad obligatoria.

Diseño exclusivo y versátil

Se presenta en dos modelos, de hasta 3 y 6 gases, con una configuración a medida en función del número de gases y el tipo de normativa de toma de gas de emergencia.

Se incluyen los componentes necesarios tales como redes de gases, válvulas de corte, toma de gas de emergencia y manómetros/vacuómetros para control de la presión/vacío.

Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave, que se incorpora por defecto.

Calidad

Ausencia total de grasas.

Equipo diseñado según la norma UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemas de canalización de gases medicinales".

Certificado como Producto Sanitario Clase IIb según la directiva 93/42/CEE.


Características técnicas



Los cuadros de corte de zona se componen de:

- Base para montaje empotrado en pared. Se trata de una dotación a medida en función del número de gases y el tipo de toma de emergencia para cada instalación. Incluye:
 - Tubo de cobre para uso medicinal de 15 mm de sección para gases comprimidos y 28 mm para vacío, con los extremos taponados.
 - Taco de distribución, que integra:
 - Manómetro para líneas de gases.
 - Vacuómetro para línea de vacío.
 - Toma de gas de emergencia (CM, DIN o NF), excepto para vacío y aire neumático.
 - Tapón para conexión de transmisor de presión (opcional).
 - Válvulas de corte.
 - Cartón protector.
- Cerco y puerta para 3 y 6 gases, que incluye un sistema de apertura de emergencia rápida y fácil sin necesidad de llave.

Dimensiones

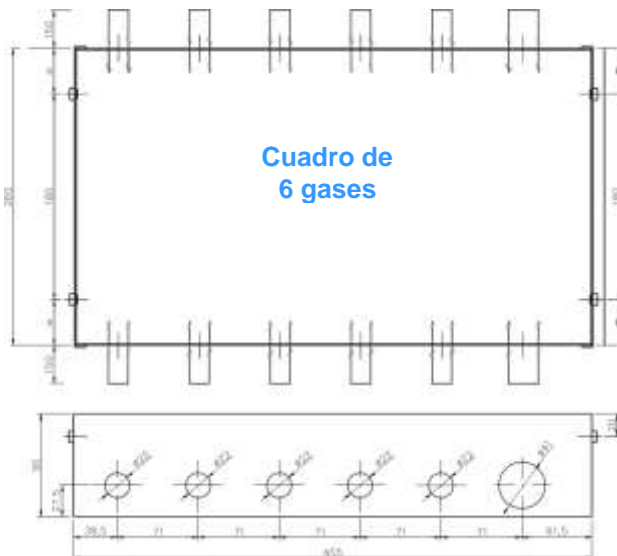

Dimensiones de la base del cuadro para montaje empotrado

www.carbueros.com
tell me more



CARBUEROS METALICOS
Grupo Air Products

Madrid:

T: 902 109 968

F: 916 579 521

hospmad@carbueros.com

Barcelona:

T: 902 109 937

F: 932 902 607

hospbcn@carbueros.com